


VIORA
shape the future



REACTION™

Победитель в номинации "Аппаратная косметология 2014"

«Продукт 2013 года» в номинации «Аппараты по телу»
Опрошено более 18 000 человек, компанией Nielsen

**ПОБЕДИТЕЛЬ СРЕДИ RF АППАРАТОВ.
ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА**



TOO BEAUTYPROF

г. Алматы, ул. Шевченко 162 Б, +7 727 321 82 80, 327 18 28

г. Астана, ш. Коргалжын 4/2, +7 7172 62 89 55, +7 701 026 0274

sales@beautyprof.kz

www.beautyprof.kz

Тенденции Рынка

Применение аппаратных методик, является основной тенденцией последних лет в индустрии красоты на просторах Азии, Европы и Евразии. Спрос на аппаратную косметологию растет с каждым годом не только среди женщин, но и среди мужчин, что подтверждает эффективность и безопасность этого направления.

Как показывает статистика, уже сейчас, многие косметологические клиники в Казахстане предлагают своим клиентам именно аппаратные методики.

Очень сильно влияет на качество предоставляемых услуг производитель и его официальный представитель. Попытки клиентов сократить затраты и приобрести оборудование подешевле у теневых поставщиков, может плохо закончиться для здоровья клиентов и репутации клиники. Во избежание этого, работайте только с дистрибьюторами с хорошей репутацией.

Beautyprof- надежный поставщик проверенного косметологического оборудования в Казахстане с 2005 года. Компания предлагает исключительно проверенное, современное и надежное оборудование. Поддержка от Beautyprof – включает в себя:

1. Маркетинговую поддержку;
2. Пожизненную программу обучения для Ваших специалистов;
3. Сервисное обслуживание аппарата.

Работая с Beautyprof у Вас появляются гарантии не только в приобретении качественного продукта, но и гарантии роста для Вашего бизнеса!

Аппарат ReAction™ работает на запатентованной технологии CORE™, оказывает влияние как на верхние слои кожи, ощутимо уменьшая проявление старения кожи, дряблости, обвисания, а так и на глубокие ткани организма, что приводит к значительному снижению веса и коррекции фигуры, целлюлита.

Решения эстетических проблем с помощью технологии CORE™

Аппарат / Проблема	Рубцы / Шрамы	Растяжки	Целлюлит / коррекция фигуры	Омолаживание / Обновление / морщины	Лифтинг	Акне / Пост акне	Удаление волос / Удаление темных волос	Пигментация	Розацея / Купероз	Интим омоложение	Дефекты орбитальной зоны
ST насадка	*	**	**	**	***	*				***	**
BC насадка		*	***		***						
FC насадка		*	***		***						

* - может использоваться; ** - хорошо подходит;

*** - лучший способ решения проблем

! Смотрите специальное предложение

Эффект

REACTION™

До

После 5 процедур




Женщина 55 лет, ST applicator

Clinic Viora

До

После 13 процедур

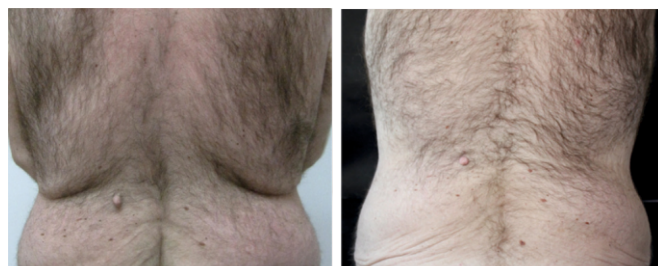

Мужчина 20 лет, V-FR

Clinic Viora

До

После 15 процедур




Женщина 32 года

Clinic Viora

До

После 5 процедур

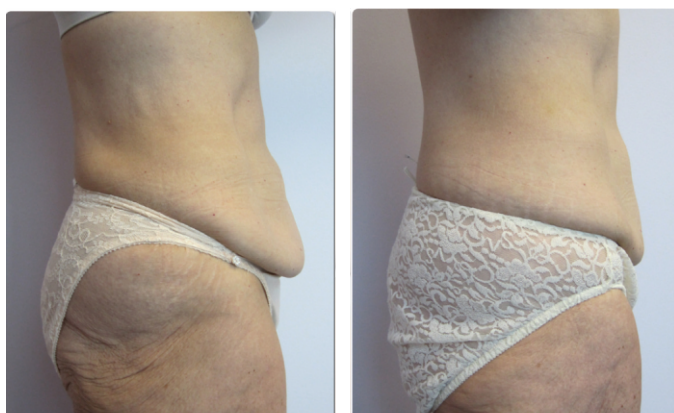


Женщина 55 лет, ST applicator

Clinic Viora

До

После 7 процедур

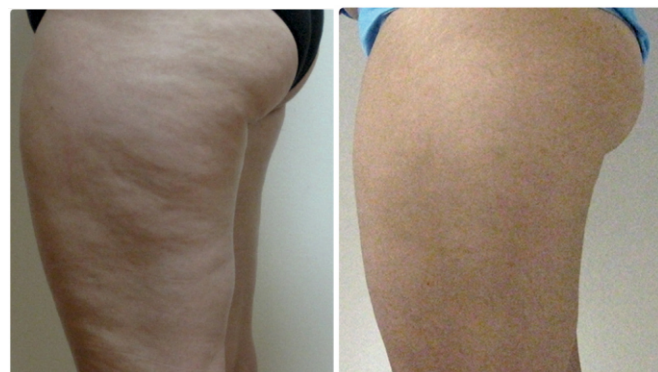

Мужчина 20 лет, V-FR

Clinic Viora



Требования к электроэнергии	90-264 в переменного тока; 50*60 Гц; Одна фаза
RF электро-энергия	До 50 Ватт (B-Coutour Applicator) До 8,5 Ватт (F-Coutour Applicator) До 50 Дж/См3/ 20 Ватт в среднем (Skin Tightening Applicator)
Модуль радиочастоты	Модуль частоты I - 0,85 МГц Модуль частоты II - 1,7 МГц Модуль частоты III - 2,45 МГц Модуль частоты IV - 0,85 МГц, 1,7 МГц, 2,45 МГц
Вес	17-19 кг без колесной базы
Габариты	45 * 35 * 40 см, аппарат и платформа отдельно
Мобильность	Маневренный, на силиконовых колесиках
Условия Эксплуатации	Рабочая температура 15С - 26С. Влажность 80%
Комплектация	4 насадки: F-Control, B-Control, Skin Tightening, Hand Piece

**3 АППЛИКАТОРА x 4 RF ЭНЕРГИЯ x 4 ВАКУУМ x 4 RF ГЛУБИНА
192 КОМБИНАЦИИ**



Технология CORE™

ReAction™ представляет собой комбинацию биполярной радиочастотной энергии технологии CORE™ (Multi-RF) и механического воздействия на ткань, вакуум.

Между электродами проводится вакуумный захват кожной складки, который концентрирует радиочастотную энергию в области складки.

Нагрев захватывает более глубокие слои кожи – дерму и гиподерму.

Сила вакуума подбирается индивидуально, на лице используется деликатный режим, не травмирующий сосуды. Глубина нагрева также подбирается индивидуально благодаря технологии CORE™ (Multi-RF) четыре режима подачи энергии на складку, чем толще складка, тем более глубоко проникает RF-энергия.

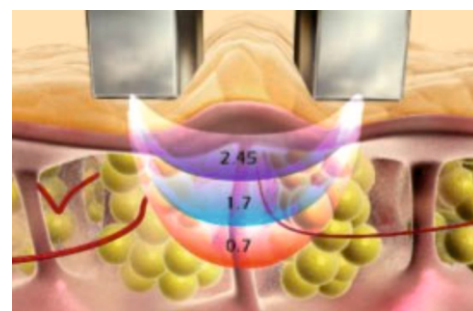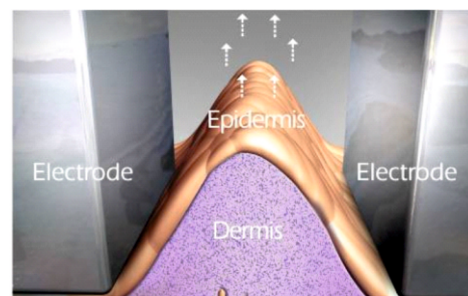

Вы достигнете безупречного результата, потому что Reaction учитывает такие особенности клиента, как:

Чувствительные области такие как внутренняя часть бедра / Костные области;
Толщина слоя кожи и подкожного жира/ Тип тела;
Анатомические области / Различные этапы режимов процедур.

3 комбинации для достижения косметологических целей:

1. RF энергия, нагрев глубоких тканей;
2. RF энергия+вакуум, для эффективного распределения энергии и равномерного прогрева тканей;
3. Вакуум, механический массаж, лимфодренаж, снятие отечности.



С какими задачами справляется ReAction:

Целлюлит; отеки; нарушение крово- и лимфообращения; нарушение обмена веществ; сухость кожи; двойной подбородок; жировые отложения. морщины, расширенные поры, состояние пост акне, второй подбородок, проблемы периорбитальной области. Обновление кожи на уровне дермы для долгосрочного результата.

Результат:

Позитивные изменения становятся заметны уже во время первого сеанса. Снижение объемов обрабатываемой области и разглаживание поверхности кожи в месте лечения, уменьшение признаков целлюлита.

	ST (Skin Tightening) Насадка для лифтинга	BC (Body Contouring) Насадка большая	FC (Facial Contouring) Насадка маленькая	Уровень проникновения Участки тела
RF Mode 1 более глубокое проникновение	800 кило Гц (или 0,8 Гц)	800 кило Гц (или 0,8 Гц)	800 кило Гц (или 0,8 Гц)	Гиподерма Ноги, живот, бедра
RF Mode 2	1.7 мега Гц	1.7 мега Гц	1.7 мега Гц	Дермис, подбородок, руки
RF Mode 3	2.45 мега Гц	2.45 мега Гц	2.45 мега Гц	Эпидермис. Лицо, области где кости близко расположены
RF Mode 4 более глубокое проникновение	800 кГц 1.7 мега Гц 2.45 мега Гц	800 кГц 1.7 мега Гц 2.45 мега Гц	800 кГц 1.7 мега Гц 2.45 мега Гц	Эпидермис. Дермис, Гиподерма
Вакуум	отсутствует	пульсирующий	пульсирующий	

Безопасность и преимущества ReAction:

Безопасный, эффективный нехирургический метод без побочных действий;
Процедура практически безболезненна и не требует систем охлаждения;
Подходит для всех типов кожи с любой текстурой и любым цветом кожи;
Инновационная процедура радиочастотной подтяжки кожи;
Наличие медицинского сертификата Европейского Союза;
Одобрено FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами);
Высокий уровень безопасности процедур и исключает риск фиброза тканей;
Исключено вредное воздействие на подлежащие ткани;
Исключает ожоги, фиброзирование и атрофию в обработанных зонах.

Эффективно:

Основанный на новой запатентованной технологии CORE™, аппарат **ReAction™** оказывает влияние как на верхние слои кожи, ощутимо уменьшая проявление старения кожи, дряблости, обвисания, а так и на глубокие ткани организма, что приводит к значительному снижению веса и коррекции фигуры, целлюлита.

Простое, комфортное лечение без отрыва от повседневных дел, видимые результаты после первой процедуры протокол состоит из 6 процедур.

Гарантии:

Гарантия пожизненной программы обучения по эксплуатации аппарата для специалистов.

Техническая, сервисная поддержка.

Маркетинговая поддержка (рекламное продвижение).

**Для «здорового» человека противопоказаний нет.
Учитывать стандартные медицинские противопоказания.**

В следующих случаях требуется консультация врача:

Кожные заболевания; Тромбоз глубоких вен;
Онкологические заболевания; Беременность и кормление грудью;
Любые эндокринные нарушения, такие как диабет;
Обостренный герпес в обрабатываемой области;
Неконтролируемое заболевание щитовидной железы;

Процедуры по тату или перманентному макияжу в обрабатываемой области; После инъекций ботулинотоксина необходимо исключить процедуры в течение 2-х недель; Пациенты, которые получили процедуру химического пилинга или филлеров не должны делать процедуру подтяжки кожи в течение двух недель; Пациенты должны подождать как минимум 3-6 месяцев после процедур глубокого химического пилинга и лазерных пилингов.



До

После 5 процедур



Женщина 49 лет

Centre for Smart Lipo, Pennsylvania, US

До

После 8 процедур




Мужчина 27 лет

Clinic Viora

До

После 2 процедур

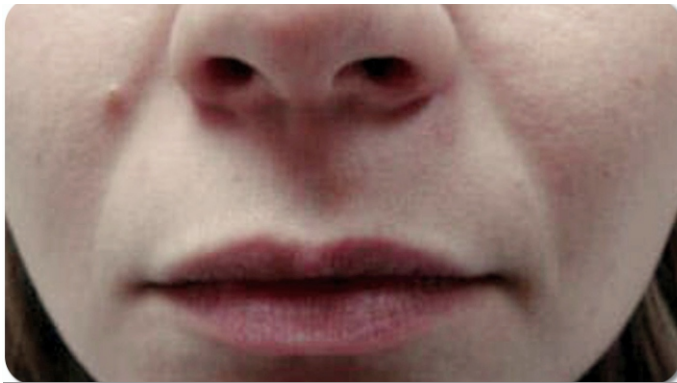

Женщина 24 года

Dr. Daniel Man /Boca Raton, Florida, USA

До

После 4 процедур



Женщина 34 года

Dr. Daniel Man /Boca Raton, Florida, USA

Компания производитель

Viora- израильский разработчик самых современных медицинских косметологических технологий на мировом рынке эстетической медицины. Заслуженный призер награды в области создания аппарата алмазной микродермабразии (Pristine) и запатентованной технологии радиолифтинга(Reaction), первые, кто показал миру существование эффективной неинвазивной мезотерапии и создал возможности эффективного IPL для кожи I типа.

Компания отличается не только высокой гарантией качества своей продукции, но и ежегодными конгрессами, тренингами для клиентов. Разрабатывает новые протоколы и предоставляет глобальную маркетинговую поддержку. Главная цель компании- доступное,качественное, инновационное оборудование с быстрой окупаемостью.

Оборудование Viora клинически проверено и одобрено известными врачами,дерматологами, пластическими хирургами по всему миру.

Beautyprof - официальный представитель компании Viora на территории РК.

Beautyprof- Лучшие технологии по доступным ценам в каждую клинику!



Предполагаемый возврат инвестиций

Стоимость процедуры Евро	Кол-во процедур/ в день	Кол-во процедур/ в месяц	Возврат инвестиций / месяц	Возврат процедур / год	Возврат инвестиций / год
60	2	50	3 000 €	575	34 500 €
60	6	150	9 000 €	1 725	103 500 €
80	2	50	4 000 €	575	46 000 €
80	6	150	12 000 €	1 725	138 800 €
100	2	50	5 000 €	575	57 500 €
100	6	150	15 000 €	1 725	172 500 €